

KONCENTRIRANO SREDSTVO ZA PROFESIONALNO RAZKUŽEVANJE POVRŠIN

Incidin® Pro


Brezaldehidni koncentrat za površine

S svojo inovativno sestavo uvaja Incidin® Pro nov standard na področju čiščenja in razkuževanja površin.

- ▲ Pro učinkovitost
- ▲ Pro hitrost
- ▲ Pro kompatibilnost z materiali



NOVO!

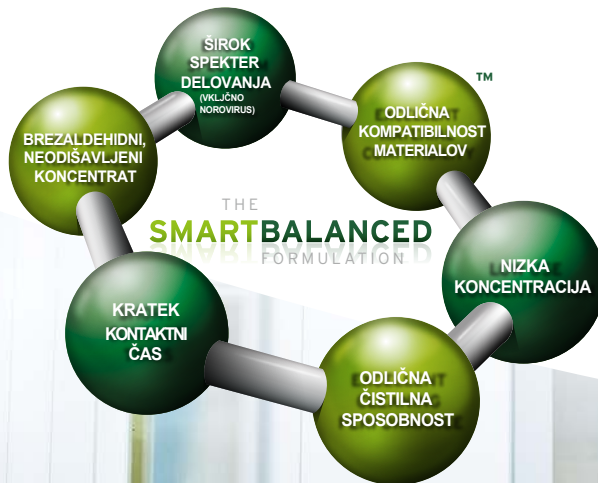

Incidin® Pro

Celostno Profesionalno razkuževanje površin

NOVO!

NOV INCIDIN PRO – PRO V UČINKOVITOSTI

UČINKUJE	KONCENTRACIJA		ČAS DELOVANJA
	%	ml/L	min
Razkuževanje površin po DGHM metodi 2001 z mehanskim delovanjem (baktericid, levurocid), čisti in umazani pogoji	0.5	5	30
	1.0	10	15
Baktericid po EN 13727, čisti in umazani pogoji	0.25	2.5	5
Levurocid po EN 13624, čisti in umazani pogoji	0.25	2.5	5
Razkuževanje površin po DGHM metodi 2001 z mehanskim delovanjem (tuberkulocid in mikobaktericid)	2.0	20	120
	4.0	40	60
Tuberkulocid in mikobaktericid po EN 14348, čisti in umazani pogoji	1.5	15	60
Učinkovitost na viruse z ovojnico po RKI 01/2004 (HIV, HBV, HCV)	0.25	2.5	30
	0.5	5	15
Adenovirus* Poliomavirus SV 40* Rotavirus* Norovirus (MNV)*	2.0	20	60
	1.5	15	15
	1.0/1.5	10/15	60/5
Norovirus (MNV) po EN 14476, čisti in umazani pogoji	1.5	15	30

*po DVV 2008

ZAKAJ UPORABLJAMO INCIDIN® PRO?

Širok spekter učinkovitosti ob kratkih kontaktnih časih

Visoka učinkovitost sredstva Incidin Pro ob kratkih kontaktnih časih in odlični kompatibilnosti z materiali.

S svojo učinkovitostjo na bakterije, kvasovke in različne viruse (vključno Norovirus) je Incidin Pro primeren za območja z visokim tveganjem in različne vrste površin tako na splošnih oddelkih kot v operacijskih dvoranah in intenzivnih enotah.

Odlična čistilna sposobnost in kompatibilnost z materiali

Odlični rezultati obsežnih testiranj na

različnih materialih, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah: kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika.

Skladen z EN normami

Izvedena testiranja po najnovejših EN normah in standardih DVV. Pregled testiranj je podan v zgornji tabeli.

Inovativna sestava brez aldehydov, dišav in barvil

Nehlapen in neodišavljen izbor učinkovin omogoča priročno in varno rabo izdelka.

Več informacij lahko najdete na

www.ecolab.eu

ali pokličite našega strokovnega sodelavca.

ECOLAB d.o.o.

Vajngerlova 4
2000 Maribor
Slovenija
Tel: +386 2 4293 100
Faks: +386 2 4293 152

© Ecolab 2014, Vse pravice pridržane.

CE 0297

HITRO. UČINKOVITO. NAPREDNO.

PODROČJE UPORABE

Incidin® Pro je tekoči koncentrat za čiščenje ter razkuževanje medicinskih pripomočkov in vseh površin v zdravstvu.

NAVODILA ZA UPORABO

Razredčite koncentrat z vodo (max. 30°C) do zelene koncentracije. Površino v celoti omočimo z zadostno količino delovne raztopine in pustimo, da se osuši.

Za pripravo 1L 0,5% delovne raztopine v posodo nalijte približno pol litra pitne vode, dodajte 5ml Incidin® Pro koncentrata ter dolijte pitno vodo do 1L.

SESTAVA

100g koncentrata vsebuje naslednje učinkovine: 10,0g 2-fenoksietanol, 8,0g N,N-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, 7,5g benzalkonijev klorid

NAROČANJE

IZDELEK	PAKIRANJE	PRODAJNA ŠIFRA
Incidin® Pro plastenka	3 x 2L	P307664
Incidin® Pro kanister	6L	P307674
Incidin® Pro sod	30L	ni na voljo
Incidin® Pro sod	200L	ni na voljo

SKLADIŠČENJE

Izdelek skladiščimo v originalni embalaži pod 25°C v suhem prostoru, ki ni izpostavljen neposrednemu soncu.

PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN PODATKE O PROIZVODU. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.

ECOLAB®